

## 供应旗达w03负离子理疗仪厂家直销

产品名称	供应旗达w03负离子理疗仪厂家直销
公司名称	广州市稳达电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:旗达 型号:W03
公司地址	广州市增城市新塘镇南安村东头坊工业区B栋
联系电话	020-26220496 13924328518

### 产品详情

服务热线020-26220496 手机13924328518（同微信）陈经理

### 氫水理疗仪-电解水制氢足浴仪-离子理疗仪-氢气足疗仪

- 一、产品原理：水通过离子清毒仪分解成大量的能量离子（即正负离子）。机器所产生的电场作用于人体，令人体体液和血液里的离子有序排列，同时机器产生的生物电流疏通了全身各大经络，人体经络畅通，各种亚健康状况得到改善，身体内正负离子经过系统复杂的生化反应后，释放出搞能量，体内的细胞活力增强，促进各种酶（酵素）活化。提高人体各排泄器官新陈代谢，加快新陈代谢。在30分钟内，随体液循环、快速、安全、有效排除长期积累在体内的自由基失衡的老细胞毒害废物，使人体逐渐回复健康。
- 二、产品特点：1.提高身体的自然清毒能力；2.缓解身体器官的清毒负担；3.促进新陈代谢和血液循环；4.增加细胞的活力5.通经温脉，调整脏腑功能，增强体质，缓解疲劳；6.有效改善睡眠、从亚健康到健康。
- 三、操作使用 1.开始使用前将电源线，离子生化器，手腕带插头分

别插入机箱插孔后，将离子生化器放入盛有水的盆中，带上手腕带，让金属片自然贴近皮肤，然后打开电源，2.打开电源开关，屏幕显示如下：

Enter Time 10-30  
Time=30 V3.0

此时通过+，-上下调键或通过数字键输入需要消毒的时间，当前默认消毒时间位30分钟.输入消毒时间后按下（ENT）确认键即可进入消毒阶段，开始消毒时间操作如下

Time=06:28POS  
T=30 M=3 E=3.0

Time=06:28是已经开始消毒时间，POS+是消毒离子极性，POS位正极，NEG为负极；T=30是设定的消毒时间，M=3为工作在第三模式，E=2.0为消毒能量，当消毒时间到达设定时间时，仪器自动停止消毒，一次消毒结束。3.消毒仪在消毒操作时，可在1.2.3模式下工作，能量值分别为0.8、1.0、1.2。消毒仪开始消毒操作时候默认第三模式，用户可以通过“+”

“-”按键来选择不同的模式，在消毒过程中按下ESC退出键时，机器停止工作，返回到待机状态。4.本消毒仪具有记录消毒时间和消毒次数的功能，当用户需要查看记录时，关掉电源，同时按下（1）数字键、（ENT）键再打开电源，此时屏幕显示：

00298 Mins  
93 Time


上一行显示总的消毒时间，下一行显示的是总的消毒次数，仪器正常消毒时间达到10分钟时，即按消毒一次记录，当按下（ESC）退出键显示记录状态，回到等待开始消毒状态。5.用户可通过输入密码清除次数和消毒时间，关掉电源，同时按下（2）数字和（ENT）键再打开电源，此时屏幕显示：

PAS:V3.0  
Clear Con


此时可输入6位数密码，输入后按下（ENT）确认键即可清除已记录的数据。当输入的密码错误时，系统恢复待机状态，当密码输入正确时系统显示如下：

Process:OK  
Mins=00000s

说明操作成果按下（ESC）退出键即可回到待机状态，仪器出厂时预设密码为：“666666”。6.用户还可以自行修改密码，当要修改密码时，关掉电源，同时按下（3）数字键和（ENT）确认键再打开电源，这时品目显示如下：

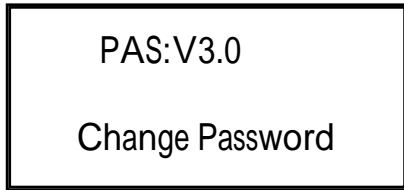

此时首先要输入原来的6位数密码，密码输入正确后按（ENT）确认键，此时屏幕显示：

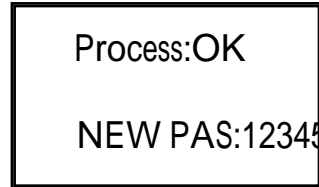

同时显示出新输入的6位数密码，输入完之后（ECS）退出键，返回到等待消毒操作状态。

7.消毒仪工作时候，如果遇到以下几种情况，提示声音和字符显示报警：

- a、离子生化器从水中拿出或离子生化器出现故障；
- b、手腕带没有戴在手上或手腕带出现故障；
- c、当消毒时能量（E值）超过2.5 8.泡脚的同时，可以使用低频按摩贴片，使用不同模式进行理疗，把自粘电极线接入机器后面插孔，把自粘电极贴片贴在欲理疗的部位，按下面板上的电源开关，设置好时间，模式，即可使用。 9.有的机型配置有远红外线理疗腰带，使用时候把腰带插头接入机器后面腰带插孔，腰带围再腰间或者有风湿炎症的膝盖等部位，不使用时请拔下插头。 注意事项

1.手上有水时不要拔插电源，注意人身安全；

2.使用时应尽量避免硬物冲击和敲打，不要用尖锐的东西擦划，以防仪器外壳受损。

3.仪器外壳表明沾有灰尘时，用抹布擦干净即可，不得使用化学剂。

4.使用按键时，注意用力均匀，以保仪器的长期正常使用； 5.使用时候，如需支起座驾，可双手拉住座驾与仪器相连接处，向左右两边往外拉，并向前拉正即可；如需收起座驾，使用同样方法操作。

五、故障处理

故障出现	处理方法
LCD无显示，机器不通电	检查电源插座是否松动或保险丝是否熔断
离子生化器不工作	检查与仪器相连接处是否接触不良或更

	换离子生化器
死机或按键无效	关掉电源开关10秒后重新启动
机器有电不工作	检查手腕带金属片是否充分接触皮肤

六、包装组件	名称	清毒仪	离子生化器	电源线	手腕带	自粘电极片	说明书
	数量	1台	1个	1根	1个	1套	1本

七、使用须知 1.清毒仪可使用普通的自来水，井水，泉水，但最好别用42度

左右热水，由于不同地区水质有差异，导通速度快慢有别，当显示水中离子浓度与活性不够时，（E值低于0.5），可在水中适当的加点普通的精盐，以增加导通能力，使水中的离子浓度与活性达到最佳状态。

2.成人每次使用时间为30分钟 3.8-15岁儿童须在监护下使用，使用时间一般为15分钟。 4.使用频率与时间

（14次为一个循环）成人50岁以下者，每两天使用一次，按要求完成一个循环之后，休息半月再进行下一次循环；50岁以上者，每3天使用一次，安装要求完成一个循环之后，休息半个月再进行一下一个循环

。 5.清毒仪是健康使者，但不是越频繁使用越好，应该安装要求使用，一个人如果每天都使用一次，则

不能超过3天，禁止同一个人一天使用两次以上。 八、使用禁忌 1.身体中带有电磁装置者禁用；

2.有伤口的部位不能浸泡； 3.怀孕或者哺乳中的妇女禁用； 4.8岁以下儿童不宜使用

5.低血糖的人必须先吃东西后再使用； 6.经过器官移植手术者不宜使用。 九、使用人群

1.长期工作压力大、脑力疲劳、应酬多、烟酒为伴者； 2.易染疾患、免疫力低下的亚健康人群；

3.在污染比较严重的环境下工作的人群； 4.喜欢食用油脂类食物的人群；

5.糖尿病、高血压、高血脂、汗脚、脚气、风湿、关节炎、跌打损伤、痛风患者等。

《工厂定制直销，OEM贴牌代加工，外观，功能都可定制》