


小型5寸开炼机

产品名称	小型5寸开炼机
公司名称	东莞正工科技机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	广东省东莞市厚街镇厚街村电厂路8号
联系电话	0769-85925106 13809825259

产品详情

小型开炼机系列

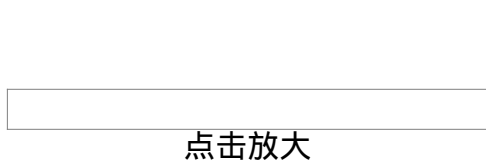

产品名称： 5寸开炼机

产品型号： zg-130

产品规格： 开炼机,小型开炼机,实验室小型开炼机

详细说明

zg-130 5寸开炼机（电加热-油加热-自来水冷-功能任意选择）

本机适合于橡胶行业之聚合物如pvc、色母粒等化工原料的混炼加工。以此将原料和配合剂混合均匀，并且达到所要求的颜色和质量。本机采用专用加热模具，滚筒表面温度均匀，永不脱层，试料厚薄可调和附机台安全保护装置，轻巧好用。

技术参数： 1.混合容量: 0.5--2kgs 2.滚筒温度: 常温 ~ 300 3.加热方式: 油加热，电加热（最新工艺设计，电力驱动导热油自动循环，自动恒温精准，不锈钢油箱防止漏油.比传统工艺电机的省电节能环保）

冷切方式：自来水冷（自动加水，温度达到后自动停水，达到节能环保之功能） 4.温度显示精度: ± 2 （温控器采用高精度pid智能微电脑控制系统,内部常数自动演算功能,比人工设定精度高,省时.带超温报警功能,保护机械及生产材料） 5.滚筒转速：前辊（慢辊） $24 \pm 1r/min$ 6. 辊筒线速度 辊筒减速比 1：1.4 7. 辊距可调范围 0.1——8mm 8. 辊距精度 $\pm 0.05mm$ 9. 一次投胶量 1——2kg 10 外形尺寸（长*宽*高）1100*720*1500之内 11. 辊筒表面温度最高温度 >300 温度控制精度 $< \pm 5$

12.、开炼机辊筒表面温度有显示 13.、辊筒可以正反转

14.、常温升到最高温度的变化为30min以内，从最高温度到常温为10min内"

15. 滚筒尺寸： 130mm × l 320mm(台湾产高硬度表面镀硬铬镜面处理,不粘料,不脱层)

16.滚筒间距: 0.2 ~ 6.0mm可调 17.安全装置: 多个碰模式紧急停止器 (有反转功能

安全第一,人性化设计,操做工人永远安全无工伤) 18.马 达:5.5kw1台(最新工艺设计

, 机械结构调整,和传统工艺机械传动11kw输出扭力一样大,达到节能之目的) 19.功 率: 9hp 20.

体积:(w × d × h) 1000 × 600 × 1200mm 在功能相同的情况下比传统工艺的体积小很多,减少面积的浪费

21. 滚筒润滑:特好之耐磨轴承接触面积大比传统的铜套加长了3分之2的 使用 寿命

22..机械结构：钢板（比传统工艺铸铁的重量轻体积小机械强度更高韧性好）

23.电源 3 ， ac380v , 20a 24.重量 约960kg

前后都有多个安全保护装置，结对保证人员安全（手脚同时控制 停机 反转 ）

正面安全装置包括：左右各一个紧急停止按钮，电源开关，停止开关，机身点动反转门。

后面安全装置包括：左右各一个紧急停止按钮，机身点动反转门。

润滑油加注：机台配备润滑黄油枪，黄油比普通的机油更耐磨，提高整机的使用寿命。

接料盆采用不锈钢制作，清洁方便，无污染不生锈，永久使用。

滚筒两头有耐磨高温档料板，可灵活调节宽度，胶料炼多少都可以满足要求.胶料少，向中间调，胶料多向两边调节。

东莞市正工科技专业研发 生产实验室检测仪器：zg-130 5寸开炼机欢迎咨询!

相关标签：开炼机 小型开炼机 实验室小型开炼机 5寸开炼机